

Etac Supporter

 etac®

Stabilt och funktionellt armstöd för toaletten.



Supporter – toalettarmstöd i tre varianter

Supporter är ett bekvämt och stabilt toalettarmstöd som underlättar vid förflyttning. Armstöden är både uppfällbara och avtagbara, och om det är ont om utrymme bredvid toalettstolen kan man enkelt och utan verktyg montera bort ett av armstöden. Den stilrena designen gör att Supporter smälter in i badrumsmiljön på ett naturligt sätt. Supporter monteras direkt på toalettstolen, varken skruv eller plugg behövs. Lock och sittring ingår för samtliga modeller.

Supporter

Supporter har fast armstödshöjd, 90° vinklade armstöd, svarta långa armstödsbrickor. Levereras med armstöden monterade.

Supporter II

Supporter II har fast armstödshöjd och vinklade armstödsrör. Den passar speciellt bra på väggmonterade toaletter eftersom armstödens nya design gör att de kan fällas upp nära väggen. Supporter II packas i en mindre förpackning, vilket är bra både logistiskt och miljömässigt.



Supporter II



Supporter

Vinklade armstöd Supporter II



Benämning:

Supporter II delmonterad 8030 3112
Supporter 8030 3012

Art.nr:

Dimensioner

Ytermått: 60 cm
Innermått mellan armstöd: 49 cm
Armstödens höjd ovan porcelinets ovankant: 25 cm
Armstödens längd: 41,5 cm

Material

Armstödsrör: Pulverlackerade stålrör
Armstödsbricka: Polypropen
Lock och sittring: Polypropen
Fästansordning: Aluminium

Design

Vikter

Totalvikt: 5 kg
Max brukarvikt: 150 kg

A&E Design



Lösningsmedelsfritt rengöringsmedel med ett pH på 6-9 eller 70% tvättsprit. Dekontamination vid högst 85°C.




Supporter ställbar

Supporter ställbar

Armstöden på Supporter ställbar är justerbara i tre höjder och två bredder. På så sätt kan de anpassas för både barn och vuxna. Armstöden är avtagbara, sidosvängbara och uppfällbara.

För att få en smalare bredd mellan armstöden kan man byta plats på armstöden med dess fästen.

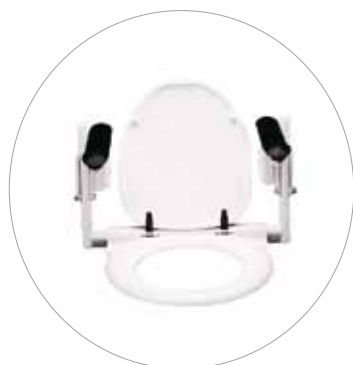

Benämning

Supporter ställbar

Art nr.

80303018

Mått:

Ytermått: 62,3 alt 51,3 cm

Innermått mellan armstöden: 52,5 alt 33,7 cm

Armstödens höjd från sittring: 20,7 alt 27,5 alt 34,2 cm

Armstödens längd: 41,5 cm

Material

Armstödsrör: Pulverlackerade stål

Armstödsbricka: Polypropen

Lock och sittring: Polypropen

Fästansordning: Aluminium


Vikter

Totalvikt: 5,8 kg

Max brukarvikt 130 kg

Design

A&E Design

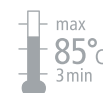

Lösningsmedelsfritt rengöringsmedel med ett pH på 6-9 eller 70% tvättsprit. Dekontamination vid högst 85°C.

Tillbehör för samtliga modeller



Toalettpappershållare

Komplett. Fästes på armstöd.

Art.nr 83030001



Fäste för signal

Art.nr 80303027

Fäste för hållare till signal anordning

Art.nr 80303038



Tvärslå 605 mm

Art.nr 80303034



Fästsats

Underlättar vid montering på porslin där det är trångt undertill vid infästningen

Art.nr 80301052



Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371 - 58 73 00
fax kundservice 0371 - 58 73 90
info@etac.se www.etac.se

 etac®