

Etac Cross XL

 etac®

Cross XL är en multifunktionell kryssrullstol i större storlekar som klarar högre brukarvikter.



Cross XL – med bred komfort


Cross XL har alla de kvaliteter och egenskaper som utmärker en Cross. Dessutom är ryggstödet förstärkt med ett fällbart tvärstag för att klara en tuff belastning. Cross XL finns i sitsbredder upp till 60 cm och klarar en brukarvikt på 155 kg. Den har många inställningsmöjligheter och ett stort tillbehörsprogram – allt för att skapa bred komfort.



*Den säkra rullstolen
Det stabila chassit gör Cross XL
både tillförlitlig och säker.*

Cross XL, grå bläster

Chassifärg

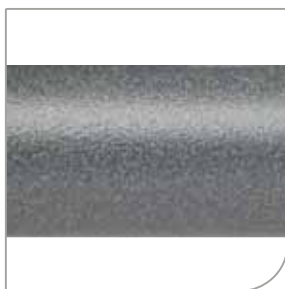


Grå bläster -53

För fler chassifärger, se www.etac.se



Cross XL, grå bläster

Mått och vikt – Cross XL

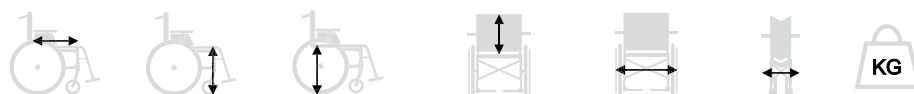

Sitsbredd	Ram	Art. nr	Sitsdjup*	Sitshöjd fram	Sitshöjd bak	Ryggstödshöjd	Totalbredd	Transportbredd**	Vikt
47,5 cm	kort	13120813	36–42 cm	40–51 cm	40-50 cm	30–45 cm	68,5 cm	32 cm	16,2 kg
47,5 cm	lång	13120814	42–48 cm	40–51 cm	40-50 cm	30–45 cm	68,5 cm	32 cm	16,4 kg
50 cm	kort	13120811	36–42 cm	40–51 cm	40-50 cm	30–45 cm	71 cm	32 cm	16,3 kg
50 cm	lång	13120812	42–48 cm	40–51 cm	40-50 cm	30–45 cm	71 cm	32 cm	16,5 kg
52,5 cm	kort	13120815	36–42 cm	40–51 cm	40-50 cm	30–45 cm	73,5 cm	32 cm	16,6 kg
52,5 cm	lång	13120816	42–48 cm	40–51 cm	40-50 cm	30–45 cm	73,5 cm	32 cm	16,8 kg
55 cm	kort	13120817	36–42 cm	40–51 cm	40-50 cm	30–45 cm	76 cm	32 cm	16,7 kg
55 cm	lång	13120818	42–48 cm	40–51 cm	40-50 cm	30–45 cm	76 cm	32 cm	16,9 kg
57,5 cm	kort	13120819	36–42 cm	40–51 cm	40-50 cm	30–45 cm	78,5 cm	32 cm	16,8 kg
57,5 cm	lång	13120820	42–48 cm	40–51 cm	40-50 cm	30–45 cm	78,5 cm	32 cm	17 kg
60 cm	kort	13120821	36–42 cm	40–51 cm	40-50 cm	30–45 cm	81 cm	32 cm	16,9 kg
60 cm	lång	13120822	42–48 cm	40–51 cm	40-50 cm	30–45 cm	81 cm	32 cm	17,1 kg

Mått och vikt gäller standardutförande för Cross XL. **Utan drivhjul blir transportbredden 22 cm.

*Sitsdjupet mäts från ryggrör till sitsklädseln framkant. Tänk på att sitsdjupet ökar när rygglädseln släckas. Toleranser på uppgivna mått och vikter är +/- 2%. Vid beställning av rullstol rekommenderar vi att man använder sig av utprovningsprotokoll från Etac.



Cross XL med vårdarbroms – skapar trygghet på promenaden


Cross XL med vårdarbroms har samma unika möjligheter och komfort som en Cross XL med enbart brukarbroms. Vårdarbromsen underlättar hanteringen för personen som skjuter på, vilket skapar trygghet för både brukaren och hjälparen. Dessutom är Cross XL med vårdarbroms alltid utrustad med brukarbroms.

Vårdarbromsen är lätt att hantera, både för att bromsa och parkera. Den passar i samtliga drivhjulspositioner med både 22" och 24" drivhjul.



*Ökad trygghet
Förutom vårdarbroms är Cross XL
alltid utrustad med brukarbroms.*

Chassifärg

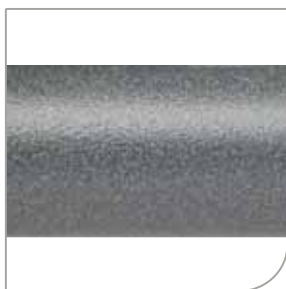

Grå bläster -53

För fler chassifärger, se www.etac.se


Cross XL med vårdarbroms, grå bläster





Cross XL med vårdarbroms,
grå bläster

Mått och vikt – Cross XL med vårdarbroms

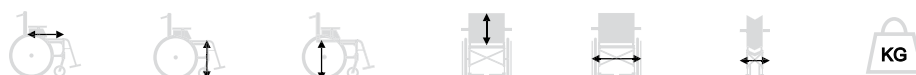

Sitsbredd	Ram	Art. nr	Sitsdjup*	Sitshöjd fram	Sitshöjd bak	Ryggstödshöjd	Totalbredd	Transportbredd**	Vikt
47,5 cm	kort	13122613	36-42cm	40-51 cm	40-50 cm	30-45 cm	69,5 cm	32 cm	18,4 kg
47,5 cm	lång	13122614	42-48 cm	40-51 cm	40-50 cm	30-45 cm	69,5 cm	32 cm	18,6 kg
50 cm	kort	13122611	36-42 cm	40-51 cm	40-50 cm	30-45 cm	72 cm	32 cm	18,5 kg
50 cm	lång	13122612	42-48 cm	40-51 cm	40-50 cm	30-45 cm	72 cm	32 cm	18,7 kg
52,5 cm	kort	13122615	36-42 cm	40-51 cm	40-50 cm	30-45 cm	74,5 cm	32 cm	18,8 kg
52,5 cm	lång	13122616	42-48 cm	40-51 cm	40-50 cm	30-45 cm	74,5 cm	32 cm	19,0 kg
55 cm	kort	13122617	36-42 cm	40-51 cm	40-50 cm	30-45 cm	77 cm	32 cm	18,9 kg
55 cm	lång	13122618	42-48 cm	40-51 cm	40-50 cm	30-45 cm	77 cm	32 cm	19,1 kg
57,5	kort	13122019	36-42	40-51 cm	40-50 cm	30-45 cm	79,5 cm	32 cm	19,0 kg
57,5	lång	13122020	42-48	40-51 cm	40-50 cm	30-45 cm	79,5 cm	32 cm	19,2 kg
60	kort	13122021	36-42	40-51 cm	40-50 cm	30-45 cm	82 cm	32 cm	19,1 kg
60	lång	13122022	42-48	40-51 cm	40-50 cm	30-45 cm	82 cm	32 cm	19,3 kg

Mått och vikt gäller standardutförande för Cross XL med vårdarbroms. **Utan drivhjul blir transportbredden 22 cm.

*Sitsdjupet mäts från ryggrör till sitsklädseln framkant. Tänk på att sitsdjupet ökar när ryggklädseln släckas. Toleranser på uppgivna mått och vikter är +/- 2%. Vid beställning av rullstol rekommenderar vi att man använder sig av utprovningsprotokoll från Etac.





Etac Cross XL med Lille Viking hjälpmotor

Teknisk data / Standard

Chassi	Aluminium och stålrör. Hopfällbart, två ramlängder	Cambervinkel	Utan vårdarbroms 2° Med vårdarbroms 0°
Bromsar	Knäledsbroms, högmonterad. Även på Cross XL med vårdarbroms.	Drivhjul	24" drivhjul med snabbkoppling, högtrycksdäck och aluminium drivring
Körhandtag	Höjdregerbara och avtagbara	Länkhjul	6,5" allround (165x30 mm)
Tvärstag	Fällbart med snäplås	Framgaffel	Medium med stålaxel
Ryggstöd	Standard 35 cm, steglöst justerbart från 30 till 45 cm	Framgaffelfäste	Justerbart i höjd och vinkel
Ryggvinkel	Standard +2°, steglöst justerbar -5° till +15°	Benstöd	Sidosvängbara och avtagbara
Ryggklädsel	Individuellt reglerbar klädsel med kardborreband. Mörkgrå klädsel i plysch/nylon. Avtagbar och tvättbar i maskin (40°C)	Fotstöd	Delade, uppfällbara fotplattor Reglerbara i höjd och djup, justerbara i vinkel
Sits	Justerbar i höjd och vinkel Standard +2°	Armstöd	Avtagbara, längd 25 cm Justerbara i höjd
Sitsklädsel	Svart tyg, reglerbart sitsdjup 6 cm	Max brukarvikt	155 kg
Tippskydd	Uppfällbara och justerbara i höjd och längd		

Möjligheter

Armstöd och sidoskydd



Armstöd

Avtagbara och höjjusterbara. Går även att låsa fast på rullstolen. Armstödsplatta i polyuretan, med kort (25 cm) eller lång (35 cm) armstödsplatta.



Överdrag armstöd

Polstrat med skumplast eller gel. Avtagbart. Finns i kort (25 cm) och lång (35 cm) modell. Överdrag i mörkgrå plysch alternativt svart Dartex.



Armstödsdyna Hemi

Vinkelreglerbar med fasta alternativt steglösa steg. För montering på långa armstöd (35 cm). Överdrag i mörkgrå plysch och svart polyester.



Armstöd


Uppfällbara. Finns med fast alternativt justerbar höjd. Kan ej kombineras med käpphållare eller drivhjul i C-rad.



Sidoskydd

Avtagbart och justerbart i höjd.

Benstöd och fotplattor

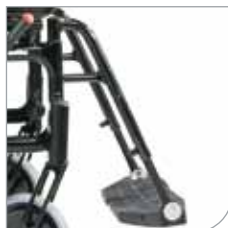

Benstöd

Vid vinkel, svarta. Avtagbara och sidosvängbara. Finns även med låsning.



Vinkelreglerbart benstöd modell 1

Kombineras med vadplatta i mjuk plysch som kan regleras i höjd, djup, vinkel och sidled. Benstöd, dynkonsol och vadplatta beställs separat.



Vinkelreglerbart benstöd modell 2

Med uppfällbar vadplatta som är reglerbar i vinkel, höjd och sidled.



Vinkelreglerbart benstöd modell 3

Kombineras med vadplatta i mjuk plysch som är uppfällbar och kan regleras i höjd, djup och vinkel. Benstöd, dynkonsol och vadplatta beställs separat.



Vinkelreglerbart benstöd modell 3 med vadplatta

Med uppfällbar vadplatta som kan justeras i två höjdlägen på benstödsröret. Passar till både höger och vänster sida.



Överdrag vadplatta

Till vinkelreglerbart benstöd ovan. Överdrag i mörkgrå plysch alternativt svart Dartex.



Fotplattor

Uppfällbara och justerbara i djup och vinkel. Reglerbara i höjd. Levereras med standard infästningsrör. Finns även med korta (-8 cm) respektive långa (+10 cm) infästningsrör.



Självförlängande benstöd

Vinkelreglerbart, sidosvängbart och avtagbart. Benstödet förlängs automatiskt vid reglering av benstödsvinkel. Tre olika längder. Alternativa vadplattor: standardform, med kant, hajfens- alternativt vågformat.



Hel fotplatta

Uppfällbar och ställbar i höjd, djup och vinkel.




Dynkonsol flip Up

Uppfällbar. För kompletterande vadplattor till vinkelreglerbara benstöd modell 1 och 3.



Vadband

Avtagbart, reglerbart i längd.

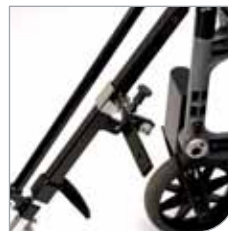

Beslag vadplatta

Gör vadplattan uppfällbar. Passar till självförlängande benstöd.



Polstring för vadband

Ger ett mjukare stöd för vaderna. Finns i 20, 30 och 40 cm längd.



Benstödsydd långt

Passar till självförlängande benstöd. Klädsel i svart Dartex.



Förlängd fotplatta

Monteras på befintlig fotplatta. Finns upp till sitsbredd 50 cm.



Benstödsydd kort

Passar till självförlängande benstöd. Klädsel i svart Dartex.



Hälband

Reglerbart i längd. Passar både höger och vänster sida. Kan ej kombineras med förlängd fotplatta.



Knäledsskydd

Passar till självförlängande benstöd. Klädsel i svart Dartex.

Möjligheter

Benstöd och fotplattor, forts.



Amputationsbenstöd

Justerbart i höjd, reglerbart i djup, vinkel och sidled. Passar för höger och vänster sida. Överdrag i mörkgrå plysch alternativt svart Dartex.



Gipsbenstöd

För helbensgips. Vinkelreglerbart. Justerbart i höjd och sidled. Passar för både höger och vänster sida.



Amputationsvikt

Motverkar tipprisk för brukare med hög benamputation.

Broms



Broms

Bromstappen greppar om däck, vilket ger en säker bromsverkan.



Broms med vinklat bromshandtag

Ger en större greppyta.



Broms med bromsspaksförlängare

Bromsspaken kan vinklas framåt, för att underlätta vid sidoöverflyttning.



Enhandsbroms med bromsspaksförlängare


Höger alternativt vänster sida. Kan kombineras med vårdarbroms.



Vårdarbroms

75 mm mellan handtagsgrepp och bromsspak. Standard på Cross XL med vårdarbroms.

Bålstöd

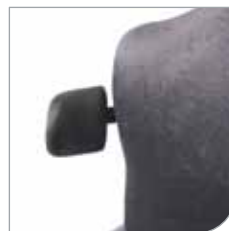

Bålstöd liten böj

Justerbart i djup och vinkel, undanfällbart. Inklusive fäste. Finns för både höger och vänster sida. Djup 140 mm x Höjd 100 mm. Klädsel i svart Dartex.



Bålstöd stor böj

Justerbart i djup och vinkel, undanfällbart. Inklusive fäste. Finns för både höger och vänster sida. 150 mm x 120 mm. Klädsel i svart Dartex.



Bålstöd njurformad

Justerbart i djup och vinkel, undanfällbart. Inklusive fäste. Finns för både höger och vänster sida. 100 mm x 200 mm. Klädsel i svart Dartex

Drivhjul och länkhjul




Drivhjul

20", 22" alternativt 24". För Cross med vårdarbroms finns endast 22" och 24". Välj mellan massiva eller luftpumpade med hög- eller lågtryckssläng.



Möjligheter

Drivhjul och länkhjul, forts.

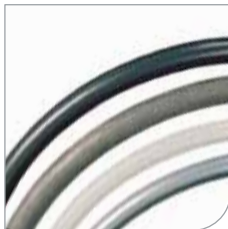

Drivringar

Välj mellan plastade, cellgummi, aluminium och rostfria.



Enarmsdrift

Passar både höger och vänster sida. Kan inte kombineras med vårdarbroms.



Länkhjul

6" (150x30 mm) alternativt 6,5" (165x30 mm).



Cambervinkel 0°

Standard på Cross med vårdarbroms.



Ekerskydd

Med grått alternativt gult tryck.



Tetra quick release adapter

Underlättar montering och demontering av drivhjul för personer med nedsatt handfunktion.

Huvudstöd



Huvudstöd

Inklusive stag, monteras på körbygel. Reglerbart i höjd, djup och vinkel. Material i mörkgrå plysch alternativt svart Dartex.



Huvudstöd med sidostöd

Inklusive stag vinklat 45°. Reglerbart i höjd, djup och vinkel. Alternativt med sidoförskjutning, stag vinklat 90° eller svanhals. Klädsel i svart Dartex.



Huvudstöd skålad

Formad model med stag vinklat 45°. Reglerbart i höjd, djup och vinkel. Alternativt stag vinklat 90° eller svanhals. Klädsel i svart Dartex.



Huvudstödsfäste

För körbygel.



Huvudstödsfäste

För ryggdyna.

Rygg



Inställbar ryggklädsel

Med de fem ryggbanden och ryggöverdraget formas ryggstödet. Tänk på att ryggklädselns inställning även påverkar sitsdjupet. Klädsel i mörkgrå plysch.



Hög rygg

Inklusive tvärstag. Steglöst justerbar mellan 38-55 cm, standard 45 cm.



Damrygg

Speciellt utformad för personer med bredare höftmått än ryggmått. Avsmalnande 5 cm. Steglöst justerbar höjd mellan 37-42 cm, standard 37 cm. Passar sitsbredd från och med 40 cm.



Ryggstöd överdrag

Fäster mot ryggklädseln med kardborreband. Mörkgrå plysch.



Komfortöverdrag

Polstrat överdrag som täcker ryggstödsrören. Ersätter standard ryggöverdrag. Finns även till hög rygg. Mörkgrå plysch.



Ryggstödshöjd

Steglöst höjjusterbar mellan 30-45 cm, standard 35 cm.



Ryggstödsvinkel

Steglöst justerbar från -5° till +15°. Standard +2°



Körhandtag

Höjdregerbara och avtagbara.



Körbygel

Höjdregerbar och avtagbar.



Ryggkil

Mjuka ryggkilar som fästs med kardborre mot klädseln. 15 cm alternativt 30 cm höga. Klädsel i mörkgrå plysch.

Sits



Sitsklädsel

Reglerbar 6 cm i djup. Cross XL finns dessutom i två olika ramlängder.



Hård sits

Avtagbar. Kompletteras med lämplig sittdyna. Finns både till kort och lång sitsram.



Sittdyna

56 cm lång. Anatomisk formad sittdyna som kapas till inställt sitsdjup. Klädsel: mörkgrå plysch.



Komfortkil

Ger större sitsgrup. Placeras i dynfodralets ficka.

Möjligheter

ECS sitt- och ryggsystem



ECS sitt- och ryggsystem

Separat sitt- och ryggsystem med olika överdrag och stoppningar. Många valmöjligheter av sitt-och ryggdynor, huvudstöd, bålstöd mm. För mer info, se www.etac.se.


Övrigt



Breddningssats armstöd

Ökar bredden mellan armstöden med 20 mm (10 mm på var sida). Distanser monteras mellan chassi och armstödsfäste, samt mellan drivhjul och chassi.

Tippskydd

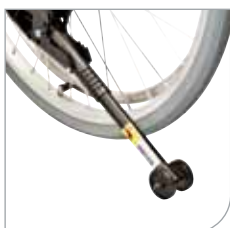

Tippskydd

Uppfällbara och justerbara i höjd. Kan ej kombineras med uppfällbara armstöd.



Breddat framgaffelfäste

Flyttar ut framgaffelfästet 3 cm. Ger större sparkutrymme.



Tippskydd teleskoperande

Uppfällbara, justerbara i höjd och reglerbara i längd och vinkel. Kan ej kombineras med uppfällbara armstöd.



Bord

Transparent. Monteras med kardborreband på långa armstöd.



Tippskydd

Uppfällbara, justerbara i höjd och reglerbara i längd. Kan ej kombineras med uppfällbara armstöd och 20" drivhjul i C-läge.



Hemibord

Fästs med kardborre på armstödsdynor med påsydd kardborrelåsning (ingår). Finns till stolar upp till 50 cm bredd. Halkskydd finns att köpa som tillbehör.



Tippskydd med tramprör

Uppfällbara och justerbara i höjd.



Höftbälte

Med snäpplås, justerbart i längd. Avtorkbart. Två alternativa fästpunkter på ramen.



Tramprör

Passar både höger och vänster sida. Kan ej kombineras med 20", 22" drivhjul i C-rad. Adapter för kombination med tippskydd kan beställas separat.



Låsning av hopfällt chassi

Fästs runt ett av sitsrören. När chassit är ihopfällt dras remmen runt bägge rören och låses med spänne.



Käpphållare Universal

Inklusive fästband för övre fixering av käppen. Monteras på trampöret alternativt tippskyddet. Passar både höger och vänster sida.



Verktygssats

Innehåller tre ringnycklar, fem insexnycklar, en hylsnyckel och en stjärnskruvmejsel.



Käpphållare

Inklusive fästband för övre fixering av käppen. Monteras baktill på gavelns drivhjulsfäste.



Regncape/regnpåse med huva

Helly Hansen Pro. Finns i storlekar mellan XXS-XL. För mer info, se www.etac.se.



Käpphållare

Inklusive fästband för övre fixering av käppen. Monteras på insidan av tippskyddsfäste.



Benvärmare

Helly Hansen Pro. Finns i small, medium och large. För mer info, se www.etac.se.



Transportfäste

Fästpunkter för fastsättning av rullstolen i bil.



Åkpåse

Helly Hansen Pro. Finns i storklekar mellan XS-XL. För mer info, se www.etac.se.



Ryggstöd V-Trak

Komplett sortiment av positionerande, fasta ryggstöd. För mer info, se www.etac.se.



Väskor

Case Logic. För mer info, se www.etac.se.



ROHO sittdynor

Stort sortiment av tryckavlastande och tryckfördelande sittdynor. För mer info, se www.etac.se.



Ryggväskor

För mer info, se www.etac.se.



Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se

 etac®

Skapar möjligheter