

Etac Cross

etac®

Cross är en multifunktionell kryssrullstol med de bästa förutsättningarna för att skapa komfort, funktion och bra köregenskaper.



Cross – en rullstol med många möjligheter

Cross kombinerar högsta komfort med bästa funktionalitet. Chassits unika stabilitet gör att Cross svarar snabbt i start och svängar. Både ryggstöd och sits är inställbara i höjd, vinkel och form. Detta i kombination med fotstöd som kan ställas in i höjd, djup och vinkel, skapar stabilitet som är förutsättningen för mobilitet.


Tack vare alla variationsmöjligheter finns det en Cross till alla: kort – lång, smal – bred. Ändras behoven kan Cross enkelt omjusteras eller kompletteras med produkter från vårt breda tillbehörssortiment.



Enkel att manövrera
Cross reagerar snabbt i start och svängar,
vilket gör den lätt att manövrera.

Inställbar sits
Sitsen är inställbar i
höjd, djup och vinkel.

Chassifärg

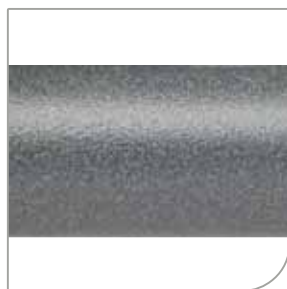

Grå bläster -53

Cross, grå bläster

För fler chassifärger, se www.etac.se



Cross, grå blåster

Mått och vikt – Cross



Sitsbredd	Ram	Art. nr.	Sitsdjup*	Sitshöjd fram	Sitshöjd bak	Ryggstödshöjd	Totalbredd	Transportbredd**	Vikt
35 cm	kort	13120101	36–42 cm	38–51 cm	38–50 cm	30–45 cm	56 cm	32 cm	15,2 kg
35 cm	lång	13120102	42–48 cm	38–51 cm	38–50 cm	30–45 cm	56 cm	32 cm	15,4 kg
37,5 cm	kort	13120103	36–42 cm	38–51 cm	38–50 cm	30–45 cm	58,5 cm	32 cm	15,3 kg
37,5 cm	lång	13120104	42–48 cm	38–51 cm	38–50 cm	30–45 cm	58,5 cm	32 cm	15,5 kg
40 cm	kort	13120105	36–42 cm	38–51 cm	38–50 cm	30–45 cm	61 cm	32 cm	15,4 kg
40 cm	lång	13120106	42–48 cm	38–51 cm	38–50 cm	30–45 cm	61 cm	32 cm	15,6 kg
42,5 cm	kort	13120107	36–42 cm	38–51 cm	38–50 cm	30–45 cm	63,5 cm	32 cm	15,5 kg
42,5 cm	lång	13120108	42–48 cm	38–51 cm	38–50 cm	30–45 cm	63,5 cm	32 cm	15,7 kg
45 cm	kort	13120109	36–42 cm	38–51 cm	38–50 cm	30–45 cm	66 cm	32 cm	15,6 kg
45 cm	lång	13120110	42–48 cm	38–51 cm	38–50 cm	30–45 cm	66 cm	32 cm	15,8 kg
47,5 cm	kort	13120113	36–42 cm	38–51 cm	38–50 cm	30–45 cm	68,5 cm	32 cm	15,7 kg
47,5 cm	lång	13120114	42–48 cm	38–51 cm	38–50 cm	30–45 cm	68,5 cm	32 cm	15,9 kg
50 cm	kort	13120111	36–42 cm	38–51 cm	38–50 cm	30–45 cm	71 cm	32 cm	15,8 kg
50 cm	lång	13120112	42–48 cm	38–51 cm	38–50 cm	30–45 cm	71 cm	32 cm	16 kg
52,5 cm	kort	13120115	36–42 cm	38–51 cm	38–50 cm	30–45 cm	73,5 cm	32 cm	15,9 kg
52,5 cm	lång	13120116	42–48 cm	38–51 cm	38–50 cm	30–45 cm	73,5 cm	32 cm	16,1 kg
55 cm	kort	13120117	36–42 cm	38–51 cm	38–50 cm	30–45 cm	76 cm	32 cm	16 kg
55 cm	lång	13120118	42–48 cm	38–51 cm	38–50 cm	30–45 cm	76 cm	32 cm	16,2 kg

Mått och vikt gäller standardutförande för Cross. **Utan drivhjul blir transportbredden 22 cm.

*Sitsdjupet mäts från rygggröer till sitsklädselns framkant. Tänk på att sitsdjupet ökar när ryggklädseln slackas. Toleranser på uppgivna mått och vikter är +/- 2%.

Vid beställning av rullstol rekommenderar vi att man använder sig av utprovningsprotokoll från Etac.



Cross med vårdarbroms – skapar trygghet på promenaden

Cross med vårdarbroms har samma unika möjligheter och komfort som en Cross med enbart brukarbroms. Vårdarbromsen underlättar hanteringen för personen som skjuter på, vilket skapar trygghet för både brukaren och hjälparen. Dessutom är Cross med vårdarbroms alltid utrustad med brukarbroms.


Vårdarbromsen är lätt att hantera, både för att bromsa och parkera. Den passar i samtliga drivhjulpositioner med både 22" och 24" drivhjul.



Ökad trygghet
Cross med vårdarbroms ger ökad trygghet för både brukaren och hjälparen.

Cross med vårdarbroms, grå bläster

Chassifärg

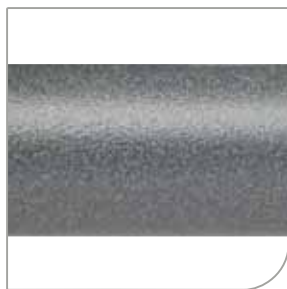

Grå bläster -53


För fler chassifärger, se www.etac.se





Cross med vårdarbroms,
grå blåster

Mått och vikt – Cross med vårdarbroms

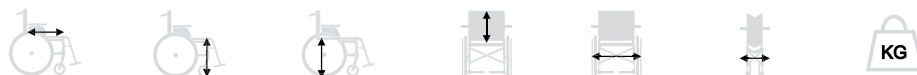

Sitsbredd	Ram	Art. nr.	Sitsdjup*	Sitshöjd fram	Sitshöjd bak	Ryggstödshöjd	Totalbredd	Transportbredd**	Vikt
35 cm	kort	13121601	36–42 cm	38–51 cm	40–50 cm	30–45 cm	57 cm	32 cm	17,4 kg
35 cm	lång	13121602	42–48 cm	38–51 cm	40–50 cm	30–45 cm	57 cm	32 cm	17,6 kg
37,5 cm	kort	13121603	36–42 cm	38–51 cm	40–50 cm	30–45 cm	59,5 cm	32 cm	17,5 kg
37,5 cm	lång	13121604	42–48 cm	38–51 cm	40–50 cm	30–45 cm	59,5 cm	32 cm	17,7 kg
40 cm	kort	13121605	36–42 cm	38–51 cm	40–50 cm	30–45 cm	62 cm	32 cm	17,6 kg
40 cm	lång	13121606	42–48 cm	38–51 cm	40–50 cm	30–45 cm	62 cm	32 cm	17,8 kg
42,5 cm	kort	13121607	36–42 cm	38–51 cm	40–50 cm	30–45 cm	64,5 cm	32 cm	17,7 kg
42,5 cm	lång	13121608	42–48 cm	38–51 cm	40–50 cm	30–45 cm	64,5 cm	32 cm	17,9 kg
45 cm	kort	13121609	36–42 cm	38–51 cm	40–50 cm	30–45 cm	67 cm	32 cm	17,8 kg
45 cm	lång	13121610	42–48 cm	38–51 cm	40–50 cm	30–45 cm	67 cm	32 cm	18 kg
47,5 cm	kort	13121613	36–42 cm	38–51 cm	40–50 cm	30–45 cm	69,5 cm	32 cm	17,9 kg
47,5 cm	lång	13121614	42–48 cm	38–51 cm	40–50 cm	30–45 cm	69,5 cm	32 cm	18,1 kg
50 cm	kort	13121611	36–42 cm	38–51 cm	40–50 cm	30–45 cm	72 cm	32 cm	18 kg
50 cm	lång	13121612	42–48 cm	38–51 cm	40–50 cm	30–45 cm	72 cm	32 cm	18,2 kg

Mått och vikt gäller standardutförande för Cross med vårdarbroms. **Utan drivhjul blir transportbredden 22 cm.

*Sitsdjupet mäts från ryggrör till sitsklädselns framkant. Tänk på att sitsdjupet ökar när rygglädseln slackas.

Toleranser på uppgivna mått och vikter är +/- 2%.

Vid beställning av rullstol rekommenderar vi att man använder sig av utprovningsprotokoll från Etac.






Teknisk data / Standard

Chassi	Aluminium och stålrör. Hopfällbart, två ramlängder	Drivhjul	24" drivhjul med snabbkoppling, högtrycksdäck och aluminium drivring
Bromsar	Knäledsbroms, högmonterad Även på Cross med vårdarbroms	Länkhjul	6,5" allround (165x30 mm)
Körhandtag	Höjdglerbara och avtagbara	Framgaffel	Medium med stälaxel
Ryggstöd	Standard 35 cm, steglöst justerbart från 30 till 45 cm	Framgaffelfäste	Justerbart i höjd och vinkel
Ryggvinkel	Standard +2°, steglöst justerbar -5° till +15°	Benstöd	Sidosvängbara och avtagbara
Ryggklädsel	Individuellt reglerbar klädsel med karborreband Mörkgrå klädsel i plysch/nylon Avtagbar och tvättbar i maskin (40°C)	Fotstöd	Delade, uppfällbara fotplattor Reglerbara i höjd och djup, justerbara i vinkel
Sits	Justerbar i höjd och vinkel Standard +2°	Armstöd	Avtagbara, längd 25 cm Justerbara i höjd
Sitsklädsel	Svart tyg, reglerbart sitsdjup 6 cm	Tippskydd	Uppfällbara och justerbara i höjd och längd
Cambervinkel	Utan vårdarbroms 2° Med vårdarbroms 0°	Max brukarvikt	125 kg

Möjligheter

Armstöd och sidoskydd

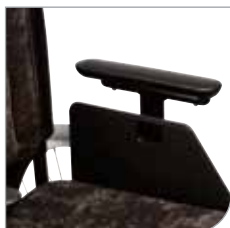

Armstöd

Avtagbara och höjjusterbara. Går även att låsa fast på rullstolen. Armstödsplatta i polyuretan, med kort (25 cm) eller lång (35 cm) armstödsplatta.



Överdrag armstöd

Polstrat med skumplast eller gel. Avtagbart. Finns i kort (25 cm) och lång (35 cm) modell. Överdrag i mörkgrå plysch alternativt svart Dartex.



Armstödsdyna Hemi

Vinkelreglerbar med fasta alternativt steglösa steg. För montering på långa armstöd (35 cm). Överdrag i mörkgrå plysch och svart polyester.



Armstöd


Uppfällbara. Finns med fast alternativt justerbar höjd. Kan ej kombineras med kapphållare eller drivhjul i C-rad.



Sidoskydd

Avtagbart och justerbart i höjd.

Benstöd och fotplattor

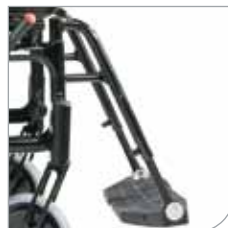

Benstöd

Vid vinkel, svarta. Avtagbara och sidosvängbara. Finns även med låsning.



Snäva benstöd

Gör att fotstödet kommer ca 6 cm närmare sitsen. Finns även i en kort version och med låsning.



Vinkelreglerbart benstöd modell 1

Kombineras med vadplatta i mjuk plysch som kan regleras i höjd, djup, vinkel och sidled. Benstöd, dynkonsol och vadplatta beställs separat.



Vinkelreglerbart benstöd modell 2

Med uppfällbar vadplatta som är reglerbar i vinkel, höjd och sidled.



Vinkelreglerbart benstöd modell 3

Kombineras med vadplatta i mjuk plysch som är uppfällbar och kan regleras i höjd, djup och vinkel. Benstöd, dynkonsol och vadplatta beställs separat.



Vinkelreglerbart benstöd modell 3 med vadplatta

Med uppfällbar vadplatta som kan justeras i två höjdlägen på benstödsröret. Passar till både höger och vänster sida.



Överdrag vadplatta

Till vinkelreglerbart benstöd ovan. Överdrag i mörkgrå plysch alternativt svart Dartex.

Benstöd och fotplattor, forts.



Fotplattor

Uppfällbara och justerbara i djup och vinkel. Reglerbara i höjd. Levereras med standard infästningsrör. Finns även med korta (-8 cm) respektive långa (+10 cm) infästningsrör.



Hel fotplatta

Uppfällbar och ställbar i höjd, djup och vinkel.



Vadband

Avtagbart, reglerbart i längd.



Polstring för vadband

Ger ett mjukare stöd för vaderna. Finns i 20, 30 och 40 cm längd.



Förlängd fotplatta

Monteras på befintlig fotplatta. Finns upp till sitsbredd 50 cm.



Hälband

Reglerbart i längd. Passar både höger och vänster sida. Kan ej kombineras med förlängd fotplatta.



Självförlängande benstöd

Vinkelreglerbart, sidovänbart och avtagbart. Benstödet förlängs automatiskt vid reglering av benstödsvinkel. Tre olika längder. Alternativa vadplattor: standardform, med kant, hajfens- alt. vågformat.



Dynkonsol Flip Up

Uppfällbar. För kompletterande vadplattor till vinkelreglerbara benstöd modell 1 och 3.



Beslag vadplatta

Gör vadplattan uppfällbar. Passar till självförlängande benstöd.



Benstöds skydd långt

Passar till självförlängande benstöd. Klädsel i svart Dartex.



Benstöds skydd kort

Passar till självförlängande benstöd. Klädsel i svart Dartex.



Knäledsskydd

Passar till självförlängande benstöd. Klädsel i svart Dartex.



Amputationsbenstöd

Justerbart i höjd, reglerbart i djup, vinkel och sidled. Passar för höger och vänster sida. Överdrag i mörkgrå plysch alternativt svart Dartex.



Amputationsvikt

Motverkar tipprisk för brukare med hög benamputation.

Möjligheter

Benstöd och fotplattor, forts.



Gipsbenstöd

För helbensgips. Vinkelreglerbart.
Justerbart i höjd och sidled.
Passar för både höger och vänster sida.



Vårdarbroms


75 mm mellan handtagsgrepp och bromsspak. Standard på Cross med vårdarbroms.



Hel fotplatta, barn

Justerbar i höjd och djup. Reglerbar i vinkel. Finns för sitsbredd 35 och 37,5 cm. Fotplattan är avtagbar.

Bålstöd

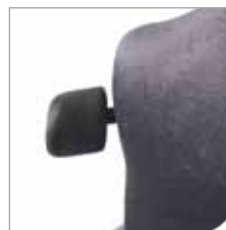

Bålstöd liten böj

Justerbart i djup och vinkel, undanfällbart. Inklusive fäste. Finns för både höger och vänster sida. Djup 140 mm x Höjd 100 mm. Klädsel i svart Dartex.

Broms



Broms

Bromstappen greppar om däcket, vilket ger en säker bromsverkan.



Bålstöd stor böj

Justerbart i djup och vinkel, undanfällbart. Inklusive fäste. Finns för både höger och vänster sida. 150 mm x 120 mm. Klädsel i svart Dartex.



Broms med vinklat bromshandtag

Ger en större greppyta.



Bålstöd njurformad

Justerbart i djup och vinkel, undanfällbart. Inklusive fäste. Finns för både höger och vänster sida. 100 mm x 200 mm. Klädsel i svart Dartex.



Broms med bromsspaksförlängare

Bromsspaken kan vinklas framåt, för att underlätta vid sidoöverflyttning.



Drivhjul

20", 22" alternativt 24". För Cross med vårdarbroms finns endast 22" och 24". Välj mellan massiva eller luftpumpade med hög- eller lågtryckssläng.



Enhandsbroms med bromsspaksförlängare

Höger alternativt vänster sida.
Kan kombineras med vårdarbroms.



Drivringar

Välj mellan plastade, cellgummi, aluminium och rostfria.



Möjligheter

Drivhjul och länkhjul, forts.



Enarmsdrift

Passar både höger och vänster sida.
Kan inte kombineras med vårdarbroms



Länkhjul

5" (125x30 mm) alternativt
6,5" (165x30 mm).



Cambervinkel 0°

Standard på Cross med vårdarbroms.



Ekerskydd

Med grått alternativt gult tryck.



Tetra quick release adapter

Underlättar montering och demontering
av drivhjul för personer med nedsatt
handfunktion.

Huvudstöd



Huvudstöd

Inklusive stag, monteras på körbygel.
Reglerbart i höjd, djup och vinkel.
Klädsel i mörkgrå plysch alternativt
svart Dartex.

Huvudstöd, forts.



Huvudstöd med sidostöd

Inklusive stag vinklat 45°. Reglerbart
i höjd, djup och vinkel. Alternativt med
sidoförskjutning, stag vinklat 90° eller
svanhals. Klädsel i svart Dartex.



Huvudstöd skålad

Formad model med stag vinklat 45°. Reglerbart
i höjd, djup och vinkel. Alternativt stag vinklat
90° eller svanhals. Klädsel i svart Dartex.



Huvudstödsfäste

För körbygel.



Huvudstödsfäste


För ryggdyna.

Ryggstöd



Inställbar ryggklädsel

Med de fem ryggbanden och
ryggöverdraget formas ryggstödet.
Tänk på att ryggklädselns inställning
även påverkar sitsdjupet.
Klädsel i mörkgrå plysch.

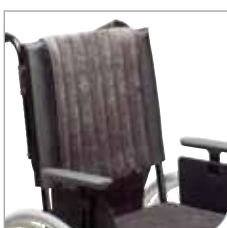

Hög rygg

Inklusive tvärstag. Steglöst justerbar
mellan 38-55 cm, standard 45 cm.

Rygg, forts.



Damrygg

Speciellt utformad för personer med bredare höftmått än ryggmått. Avsmalnande 5 cm. Steglöst justerbar höjd mellan 37-42 cm, standard 37 cm. Passar sitsbredd från och med 40 cm.



Ryggstöd överdrag

Fäster mot ryggklädseln med kardborreband. Mörkgrå plysch.



Komfortöverdrag

Polstrat överdrag som täcker ryggstödsrören. Ersätter standard ryggöverdrag. Finns även till hög rygg. Mörkgrå plysch.



Ryggstödshöjd

Steglöst höjjusterbar mellan 30-45 cm, standard 35 cm.




Ryggstödsvinkel

Steglöst justerbar från -5° till +15°, standard +2°.



Körhandtag

Höjdregerbara och avtagbara.

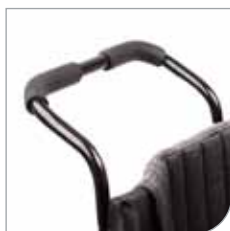

Körbygel

Höjdregerbara och avtagbara.



Tvärstag

Ger extra stabilitet. Fällbart med snäplås.



Ryggkil

Mjuka ryggkilar som fästs med kardborre mot klädseln. 15 cm alternativt 30 cm höga. Klädsel i mörkgrå plysch.

Sits



Sitsklädsel

Reglerbar 6 cm i djup. Cross finns dessutom i två olika ramlängder.



Hård sits

Avtagbar. Kompletteras med lämplig sittdyna. Finns både till kort och lång sitsram.



Sittdyna

56 cm lång. Anatomisk formad sittdyna som kapas till inställt sitsdjup. Klädsel i mörkgrå plysch.



Komfortkil

Ger större sitsgrop. Placeras i dynfodralets ficka.

Möjligheter

ECS sitt- och ryggsystem



ECS sitt- och ryggsystem

Separat sitt- och ryggsystem med olika överdrag och stoppningar. Många valmöjligheter av sitt-och ryggdynor, huvudstöd, bälstöd mm. För mer info, se www.etac.se.

Övrigt



Breddningssats armstöd

Ökar bredden mellan armstöden med 20 mm (10 mm på var sida). Distanser monteras mellan chassi och armstödsfäste, samt mellan drivhjul och chassi.

Tippskydd



Tippskydd

Uppfällbara och justerbara i höjd. Kan ej kombineras med uppfällbara armstöd.



Breddat framgaffelfäste

Flyttar ut framgaffelfästet 3 cm. Ger större sparkutrymme.



Tippskydd teleskoperande

Uppfällbara, justerbara i höjd och reglerbara i längd och vinkel. Kan ej kombineras med uppfällbara armstöd.



Bord

Transparent. Monteras med kardborreband på långa armstöd.



Tippskydd

Uppfällbara, justerbara i höjd och reglerbara i längd. Kan ej kombineras med uppfällbara armstöd och 20" drivhjul i C-läge.



Hemibord

Fästs med kardborre på armstödsdynor med påsydd kardborrelåsning (ingår). Finns till stolar upp till 50 cm bredd. Halkskydd finns att köpa som tillbehör.



Tippskydd med tramprör

Uppfällbara och justerbara i höjd.



Höftbälte

Med snäpplås, justerbart i längd. Avtorkbart. Två alternativa fästpunkter på ramen.



Tramprör

Passar både höger och vänster sida. Kan ej kombineras med 20", 22" drivhjul i C-rad. Adapter för kombination med tippskydd kan beställas separat.



Låsning för hopfällt chassi

Fästs runt ett av sitsrören. När chassit är ihopfällt dras remmen runt bågige rören och låses med spänne.

Övrigt, forts.



Käpphållare Universal

Inklusive fästband för övre fixering av käppen. Monteras på trampröret alternativt tippskyddet. Passar både höger och vänster sida.



Verktygssats

Innehåller tre ringnycklar, fem insexnycklar, en hylsnyckel och en stjärnskruvmejsel.



Käpphållare

Inklusive fästband för övre fixering av käppen. Monteras baktill på gavelns drivhjulsfäste.



Regncape/regnpåse med huva

Helly Hansen Pro. Finns i storlekar mellan XXS-XL. För mer info, se www.etac.se.



Käpphållare

Inklusive fästband för övre fixering av käppen. Monteras på insidan av tippskyddsfäste.



Benvärmare

Helly Hansen Pro. Finns i small, medium och large. För mer info, se www.etac.se.



Transportfäste

Fästpunkter för fastsättning av rullstolen i bil.



Åkpåse

Helly Hansen Pro. Finns i storlekar mellan XS-XL. För mer info, se www.etac.se.



Ryggstöd V-Trak

Komplett sortiment av positionerande, fasta ryggstöd. För mer info, se www.etac.se.



Väskor

Case Logic. För mer info, se www.etac.se.



ROHO sittdynor

Stort sortiment av tryckavlastande och tryckfördelande sittdynor. För mer info, se www.etac.se.



Ryggväskor

För mer info, se www.etac.se.



Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se

 etac®

Skapar möjligheter