

ECS – Etac Comfort System

Smart sitt- och ryggsystem för ökad komfort
till rullstolsfamiljerna Cross och Next

 **etac**[®]
Skapar möjligheter

Öka komforten i allroundstolen med ECS

Med Etac ECS sitt- och ryggsystem kan allroundstolen användas längre. Istället för att byta stol byts rygg och sids-delar enkelt ut mot ECS, vilka stabiliserar sittandet och ger extra komfort.

De mjukt formade dynorna finns i två olika överdragsmaterial, svart Dartex och mörkgrå plysch. Dessa finns tillgängliga i samtliga rullstolsbredder. Ryggdynan finns i en hög och en låg modell, och de olika sittedynorna i kort respektive lång modell. Sittedynornas stoppning är i memory foam eller polyeten.



Hög eller låg modell på ryggdyna

Hög rygg är justerbar i höjd mellan 59–69 cm, låg rygg mellan 45–50 cm. Finns för sidsbredd 35–60 cm. Svart Dartex eller mörkgrå plysch.

Lätthanterliga dynor

Med ett enkelt handgrepp tar du av eller sätter på dynan på ryggrören. En stol med ECS dynor är precis lika enkel att hantera och fälla ihop som en allround rullstol.

ECS ger dig många valmöjligheter!

Ställbar rygg
Ryggen justeras enkelt baktill med hjälp av kardborreband.



Formad eller plan sittedyna
Stoppning till dynorna finns att välja mellan memory foam, vilken är en stoppning som formar sig efter brukaren eller polyeten; en tryckfördelande stoppning. Dynorna kan väljas i materialen mörkgrå plysch eller svart Dartex. Finns i lång och kort modell.



Tillval/tillbehör



Ryggdyna hög modell

Justerbar i höjd mellan 59–69 cm.
Finns för sitsbredd 35–60 cm.
Material: Mörkgrå plysch



Ryggdyna hög modell

Justerbar i höjd mellan 59–69 cm.
Finns för sitsbredd 35–60 cm.
Material: Svart Dartex



Ryggdyna låg modell

Justerbar i höjd mellan 45–50 cm.
Finns för sitsbredd 35–60 cm.
Material: Mörkgrå plysch



Ryggdyna låg modell

Justerbar i höjd mellan 45–50 cm.
Finns för sitsbredd 35–60 cm.
Material: Svart Dartex



Formad sittdyna

Finns i både lång och kort modell.
Fästs med kardborreband.
Material: Mörkgrå plysch



Formad sittdyna

Finns i både lång och kort modell.
Fästs med kardborreband.
Material: Svart Dartex



Memory foam stoppling

En stoppling som formar sig efter brukaren.
Finns till både formad och plan sittdyna.



Polyeten stoppling

En tryckfördelande stoppling.
Finns till både formad och plan sittdyna.



Plan sittdyna

Lång och kort modell. Stoppling i memory foam eller polyeten. Fästs med kardborreband.
Material: Mörkgrå plysch




Plan sittdyna

Lång och kort modell. Stoppling i memory foam eller polyeten. Fästs med kardborreband.
Material: Svart Dartex



Hård sits

Placeras direkt på sitsrören och kan enkelt lyftas av vid ihopfällning. Sitsen har två positioner för alternativa sitsdjup.

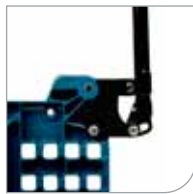

Ryggförskjutning

När ECS ryggdyna används förminskas sitsdjupet med ca 50 mm. Detta ökas genom att ryggrören flyttas bakåt på gaveln. Detta möjliggör också ytterligare ryggvinkling med 5 grader bakåt.



Sitsförlängare

Höjd 10 cm. Finns i bredderna 5 och 10 cm.
Tillgänglig med eller utan fäste.



Armstödsdyna mörkgrå plysch

Finns både i lång och kort modell.
Stoppling i gel eller polstrad.



Armstödsdyna svart Dartex

Finns både i lång och kort modell.
Stoppling i gel eller polstrad.



Ryggbeslag

Till hög rygg. för huvudstöd, fästes på ryggstödet.
Komplett sats.

Tillval/tillbehör (forts.)



Huvudstöd modell 1

Reglerbart i höjd, djup och vinkel.
Material: Mörkgrå plysch eller Svart Dartex



Huvudstöd modell 2

Med sidostöd. Inkl. 45° stag.
Reglerbart i höjd, djup och vinkel.
320 mm (240 inv.) x 170 mm bred.
Finns även med sidoförskjutning.
Material: Svart Dartex



Huvudstöd modell 3

Formad. Inkl. 45° stag. Reglerbart i höjd, djup
och vinkel. 250 mm x 140 mm bred.
Material: Svart Dartex



Bålstöd liten böjd

Storlek 140 mm x 100 mm. Justerbara i djup
och vinkel, undanfällbara. Inkl. fäste.
Finns för både höger och vänster sida.
Material: Svart Dartex



Bålstöd stor böjd

Storlek 150 mm x 120 mm. Justerbara i djup
och vinkel, undanfällbara. Inkl. fäste.
Finns för både höger och vänster sida.
Material: Svart Dartex



Bålstöd njurformad

Storlek 100 mm x 200 mm. Justerbara i djup
och vinkel, undanfällbara. Inkl. fäste.
Finns för både höger och vänster sida.
Material: Svart Dartex

